


全自动高通量 核酸提取仪96通道

国家认证一类医疗器械

备案号：苏泰械备20200680

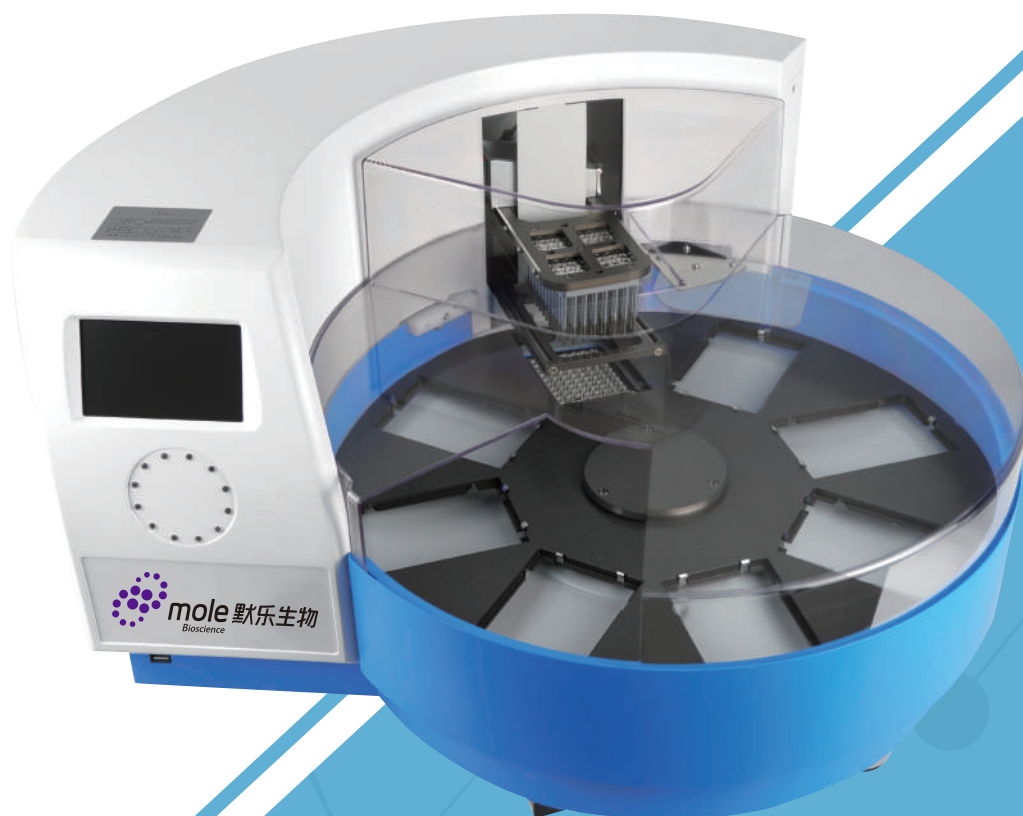

• 高效快速

• 智能全面

• 安全可靠

• 操作便捷

产品优势

高效
快速

最快可在13min内完成
96个样本的核酸提取

智能
全面

多种加热混合模式，
可匹配多种样本和核酸提取试剂

安全
可靠

添加挡板防止磁棒转移时的
液体污染，保证了实验结果的准确可靠

操作
便捷

可远程软件编辑实
验程序，操作便捷

产品特点

- 多加热模式：8块板位可独立加热，加热模式有mix、block1、block2三种选择；
- 多混合模式：3种振幅，5档频率可调，可根据不同的样本和提取试剂盒调整模式，最快13min完成核酸提取；
- 智能循环吸磁：磁珠回收率 > 99.5%，极大地降低了体系中的磁珠残留量，同时磁棒在孔内的高度可根据样本量进行调整；
- 防污染挡片：防止磁力棒从一个板转移至另外一个板的时候，液体中途滴落造成污染；
- 弹簧片设计：增加孔板和底盘接触的稳定性，防止意外脱落；
- 底座减震：铝合金材质，减震缓冲，有效降低仪器运行时的音量；
- 智能远程编程：仪器端发射wifi，电脑端连接后，通过软件编程，最高可存储500组程序。

仪器参数表

操作界面	彩色触摸
界面语言	中英文界面（可定制）
样品通量	1-96
实验存储	存储 > 500组程序
网络通讯	可扩展以太网远程控制
加热模式	block1/block2/mix
温度控制	室温-96℃
振 幅	high/middle/low
电 源	100 - 240 Vac, 50/60 Hz
板 位	8个，96个样本
液晶显示屏	5" 480 x 800 pixel color display
感应装置	热释电技术

频 率	fastest/fast/middle/slow/slowest
处理体积	20-1000 (μ l)
智能磁化	有
循环吸磁(loop)	1-10次
吸磁模式	一步吸磁/分步吸磁
磁珠回收率	> 99.5%
计算机接口	RS232
污染控制	11级HEPA过滤网
噪 音	<60db
仪器外观尺寸	685mm × 600mm × 390mm($\pm$ 10mm)
仪器重量	41kg($\pm$ 0.5kg)
备 案 号	苏泰械备20200680

江苏默乐生物科技股份有限公司
Jiangsu Mole BioScience Co.,Ltd.

股票代码: 839185

江苏·泰州

地址: 江苏省泰州市医药高新区健康大道805号G116幢6-7层
电话: 0523-86080606

浙江·杭州

地址: 浙江省杭州市余杭区文一西路1500号健康谷5号楼4-5层
电话: 0571-87209306 / 87209308